



EpiPen® veya EpiPen® Jr adrenalin (epinephrine) otomatik enjektörleri nasıl kullanılır


(How to give EpiPen® or EpiPen® Jr adrenaline (epinephrine) autoinjectors)

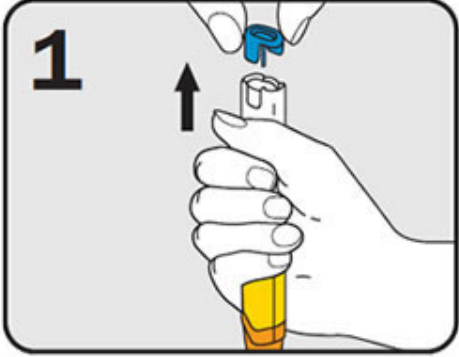

1. EpiPen® aygıtını kavrayın and ve MAVİ GÜVENLİK TIKACINI ÇIKARTIN

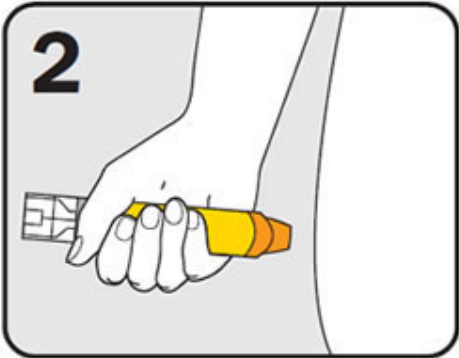

2. Bacağı kımıldatmadan TURUNCU RENKLİ UCUNU üst bacağıınızın dış yüzeyine dayayın (giysili veya giysisiz)

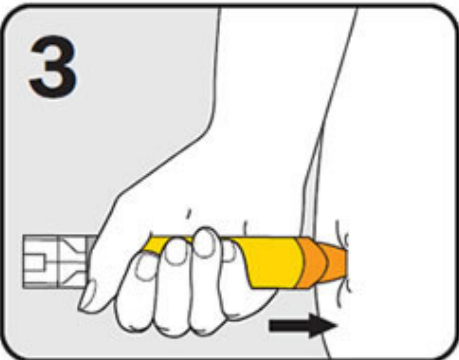

3. Bir klik sesi duyulana veya hissedilene kadar SIKICA BASTIRIN ve 3 saniye öylece tutun

EpiPen® aygıtını ÇEKİN

Not: Aygıtın etiketinde ne yazdığına bakılmaksızın tüm EpiPen®'ler öylece 3 saniye tutulmalıdır